


seca 700

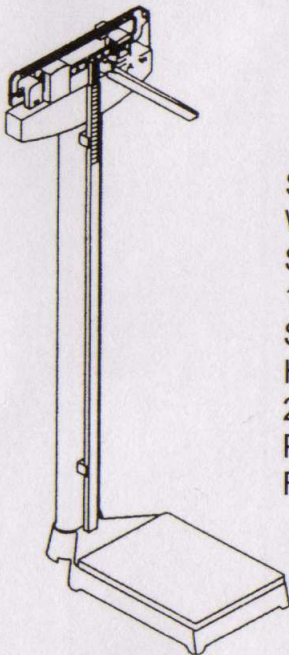

SECA CORPORATION
Weighing and measuring
Systems Since 1840
1352 Charwood Road
Suite E
Hanover Maryland
21076 USA.
Ph: (410) 694 9330
Fax: (410) 694 9680

seca corporation
Model 700 112 1009
Ser. No.: 00000038972

1. Congratulations!

By purchasing the **seca** 700 personal scale you have acquired a highly accurate and sturdy piece of equipment.

For more than 150 years, **seca** has been at the service of health, and as market leader in several countries, is always setting new and higher standards with its innovative developments for weighing and measuring.

The **seca** 700 is designed for use in hospitals, doctor's offices, gymnasiums and extended care facilities.

The personal scale has a very sturdy design and will serve you a long time.

1. ¡Felicidades!

Al comprar la báscula personal **seca 700** usted ha adquirido un equipo resistente y de alta precisión.

Por más de 150 años, **seca** ha estado al servicio de la salud, y como líder del mercado en varios países, constantemente está sentando estándares más altos con sus innovadores desarrollos para pesaje y medición. El modelo **seca 700** ha sido diseñado para uso en hospitales, consultorios médicos, gimnasios y centros de atención de la salud.

La báscula personal tiene un diseño sumamente robusto y le dará un excelente servicio por muchos años.

#356

2. Safety

Before using the new scale, please take a little time to read the following safety instructions.

- Follow the instructions in the manual.
- Do not drop the scale or subject it to heavy shocks.
- Have repairs carried out by authorized persons only.

2. Seguridad

Antes de usar la báscula, por favor tome tiempo para leer las instrucciones siguientes.

- Siga las instrucciones en el manual.
- No deje caer la báscula ni la someta a golpes fuertes.
- Haga que las reparaciones las llave a cabo únicamente personal autorizado.

3. Before starting

Unpacking

- Remove all packaging

The following components are supplied:

- Weighing platform and base
- Column and head piece
- Measuring rod (inside section)
- 4 fixing screws

3. Antes de empezar...

Desempaque

- Retire todo el material de empaque.

Se surten los siguientes componentes:


- Base y plataforma de pesaje
- Cabezal y columna
- Altimetro (sección interior)
- 4 tornillos de fijación

4. Assembly

- Place the column on the base with the measuring rod facing the platform.
- Screw the column to the base using 4 screws.


4. Ensamble

- Coloque la columna en la base con el altímetro de cara a la plataforma.
- Fije la columna a la base utilizando los 4 tornillos.

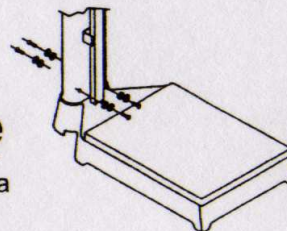

- Carefully tilt the scale to one side and hook the load lever onto the tie rod.
- Stand the scale back up again.


- Con cuidado voltee la báscula hacia un lado y enganche el tirante en la palanca.
- Vuelva la báscula a la posición vertical.

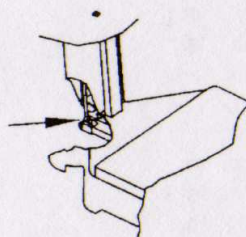

- Insert the inside section of the measuring rod into the outside section fixed to the column.
- Place the scale on a safe, level surface.

- Inserte la sección interior del altímetro en la sección exterior fijada en la columna.

- Coloque la báscula en un lugar seguro y con un piso nivelado.

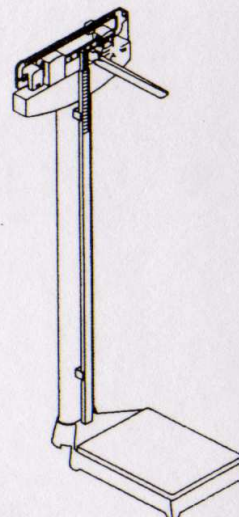


5. Setting the scale's zero point

Before the scale is used for the first time and whenever the scale is moved to another place, the scale's zero point: must be set.

First slide the two sliding weights to zero. With the scale unloaded, turn the adjuster screw until the tip of the measuring indicator is in the middle of the window.

Measuring Indicator
(Indicador de pesaje)

Adjuster screw
(Tornillo de Ajuste)

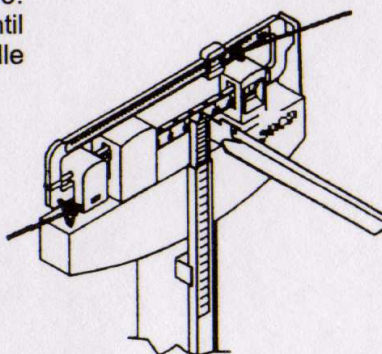

5. Ajuste de la báscula a cero


Antes que la báscula sea utilizada por primera vez y cada vez que sea movida de lugar, la báscula debe ser ajustada a cero, primero deslize los dos contrapesos a la posición de cero. Con la báscula sin carga, gire el tornillo de ajuste hasta que el extremo del indicador de la ventana se encuentre en el centro.

6. Operation

Correct wighing

- Step on the platform and stand still.
First of all make the coarse adjustment in steps of 20 kg. or 50 lbs.
- Lift the sliding weight on the lower scale, slide it to the right and let it latch below the roughly estimated weight.
For fine adjustment proceed as follows.
- Slide the upper sliding weight to the right until the measuring indicator settles in the middle of the window.
- Add the two values to determine the total Weight.

Fine adjustment
(in steps of - 100 g/0.25 lbs.)
Ajuste fino
(En incrementos de 100 g/0.25 lbs.)

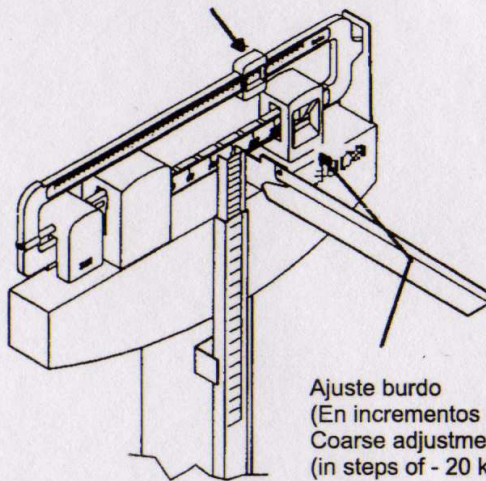

Ajuste burdo
(En incrementos de 20 kg/50lbs)
Coarse adjustment
(in steps of - 20 kg/50 lbs.)


6. Operación

Pasaje correcto

- Súbase en la plataforma y permanezca quieto.
Primero que nada haga el ajuste burdo en incrementos de 20 kg. ó 50 lbs.
- Eleve el contrapeso móvil en la escala de abajo, deslícelo hacia la derecha y permita que se atore en la escala próxima al peso estimado.
Para el ajuste fino proceda como sigue:
- Deslice el contrapeso móvil en la escala superior hacia la derecha hasta lograr que el indicador de pesaje permanezca en el centro de la ventana.
- Sume el valor de las dos escalas para determinar el peso total.

Measuring rod

- Fold the measuring tongue up, it will latch into the horizontal position.
- Push the measuring tongue up so that the person to be measured can easily stand below it.
- Ask the person to be measured to stand on the platform with his/her back to the measuring rod, the heels should be at the rear end of the platform; back and head must be straight.
- Now slide the measuring slide downwards until the measuring tongue rests on the head.
- For heights below 126.5 cm slide the measuring rod down until you feel resistance.
- Do not bend the measuring tongue.
- Read off the height at marking 1.

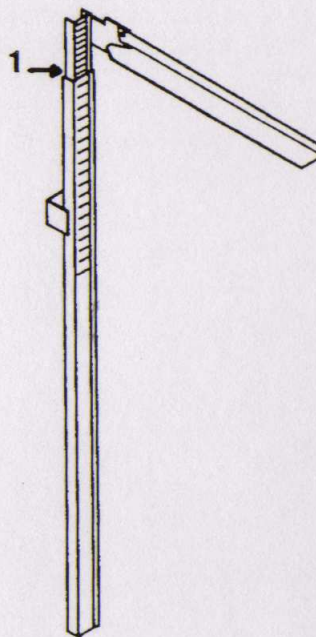

Altímetro

- Voltee el tope (lengueta) hacia arriba, se fijará en la posición horizontal.
- Empuje el tope hacia arriba de modo que la persona a pesarse pueda pararse fácilmente por debajo de éste.
- Pídale a la persona que se va a pesar que se pare sobre la plataforma de espalda al altímetro. Los talones deben estar en la parte posterior de la plataforma; la espalda y cabeza deben estar derechas.
- Ahora deslice la sección interior del altímetro hacia abajo hasta que el tope descansa en la cabeza.
- Para altura abajo de 126.5 cm. deslice el altímetro hacia abajo hasta que sienta resistencia.
- No doble el tope del altímetro
- Lea la altura en la posición 1 (dibujo).

7. Cleaning

Clean the outside of the scale as required with a domestic cleaning agent or a commercially available disinfectant. Follow the manufacturer's instructions.

7. Limpieza

Limpie el exterior de la báscula cuando se requiere con un agente limpiador doméstico o con un desinfectante comercial. Siga las instrucciones del fabricante.

8. What to do if...

- the beam does not move if a person steps on the scale?
- check that the load lever is hooked in correctly.
- a weight is indicated which is obviously wrong?
- Check whether the zero point of the scale has been properly set.
- measuring errors or deviations occur when the height is determined?
- Please pay attention that the patient does not lean against the measuring rod.
- Deflection of the measuring rod will cause measuring errors.

8. Que hacer si...

- ¿El brazo (las escalas) no se mueve cuando una persona se sube en la báscula?
- Asegúrese que la palanca está conectada correctamente.
- El peso que se indica es obviamente incorrecto?
- Asegúrese que la báscula fue ajustada a cero correctamente.
- Ocurren errores al medir la altura?
- Ponga atención que el paciente no se recargue contra el altímetro, una flexión
- en el altímetro causa errores en la medición.

9. Technical data

Dimensions
Width:
Depth:
Height
Weight:
Scale:
Max. Load
Fine graduations
Measuring rod
Measuring range
Graduations

Dimensiones
Ancho: 44 cm/17.3"
Profundidad: 55 cm/21.6"
Altura: 146.5 cm/57.6"
Peso: approx. 19 kg/41.8 lbs
Escalas:
Capacidad Máxima 160 kg/400 lbs.
División Mínima 0.1 kg/025 lbs.
Altímetro
Rango de Medición 89-210 cm/36-83"
Graduaciones 5mm/1/4"

9. Datos técnicos

10. Disposal

Disposal of the scale and of the measuring rod

If the scale or the measuring rod can no longer be used, your local refuse disposal service will be glad to provide information about profesional disposal in accordance with regulations.

10. Desecho

Desecho de la báscula y del altímetro

Si la báscula o el altímetro ya no se pueden usar, informese con su servicio local de reciclado y/o manejo de desperdicios de acuerdo a los reglamentos vigentes.

11. Guarantee period

We give a guarantee of 5 years from the date of purchase for defects attributable to defective materials or workmanship. All movable parts, such as batteries, cables, power packs rechargeable batteries, etc. are excluded. Defects which come under the guarantee are repaired at no charge. Other claims cannot be recognized. Transport to and from **Seca** will be at the customer's expense if the equipment is located somewhere other than at the purchaser's location. Claims under guarantee for transport damage will be honoured only if the complete original packaging was used for transportation and the scale was secured and fixed inside the packaging in accordance with its condition when originally packed. You should keep all packaging for this purpose. The guarantee is invalidated if the equipment is opened by unauthorized persons. We would ask our customers abroad to contact the sales organization of the appropriate country in the event of a claim under guarantee.

Important: the guarantee is valid only in combination with proof of purchase.

11. Período de garantía

Nosotros damos 5 años de garantía a partir de la fecha de compra contra defectos atribuibles a materiales defectuosos o defectos de mano de obra. Los defectos cubiertos por la garantía serán reparados sin costo, otros reclamos no serán reconocidos, el transporte de y hacia **seca** será con costo al cliente si el equipo se encuentra en otro lugar distinto al de compra. Reclamos bajo garantía por los daños durante el transporte serán válidos solo cuando el empaque original completo fue usado para el transporte y la báscula fue fijada y asegurada dentro del empaque tal como se empacó originalmente, debe guardar todo el empaque para este efecto. La garantía será invalidada si el equipo ha sido abierto por personal no autorizado. Solicitamos a nuestros clientes foráneos contactar al distribuidor de su país para reclamos sobre garantía.

Importante: la garantía es válida únicamente en combinación con el comprobante de compra.